


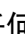
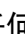
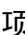


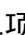

# Basic Menu Map with Sensor:

## 带探头(传感器)的基本菜单屏幕:

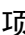

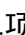

### Navigation 导航



从任何屏幕按下以打开菜单。Press  from any screen to open the Menu.

按和以滚动菜单项。Press  and  to scroll through the menu items.

按打开所需的菜单项。Press  on the desired menu item to open.

滚动条出现在菜单上，以指示何时可以使用其他文本。The scroll bar appears on menus to indicate when additional text is available.

- 按向下滚动可查看其他项目。Press  to scroll down to view additional items.
- 按向上滚动。Press  to scroll back up.

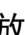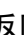按此键转到上一个屏幕。按住不放返回主屏幕。Press to go to previous screen. Hold to return to the Home screen.



Press   
按

主屏幕	Home Screen
1 暂停输注	Suspend Delivery
2 音频选项	Audio Options
3 历史	History
4 储药器和管路	Reservoir & Tubing
5 胰岛素设置	Insulin Settings
6 探头设置	Sensor Settings
7 事件标记	Event Markers
8 提醒	Reminders
9 实用工具	Utilities

Bolus 大剂量      Basal 基础率      Active Insulin 活性胰岛素      BG 血糖

# 菜单中英对照

1

暂停输注(停泵)	Suspend Delivery
----------	------------------

2

音频选项	Audio Options
音频	Audio
音频和振动	Audio & Vibrate
振动	Vibrate
音量	Volume

3

历史	History
摘要	Summary
每日历史	Daily History
报警历史	Alarm History
探头血糖回顾	Sensor Glucose Review*

4

储药器和管路	Reservoir & Tubing
新储药器	New Reservoir
填充插管(充盈)	Fill Cannula

5

胰岛素设置	Insulin Settings
大剂量向导设置	Bolus Wizard Setup
基础模式设置	Basal Pattern Setup
预设临基设置	Preset Temp Setup
预设大剂量设置	Preset Bolus Setup
双波/方波设置	Dual/Square Setup
大剂量增量	Bolus Increment
最大基础/大剂量	Max Basal/Bolus
简易(声响)大剂量	Easy Bolus
自动暂停	Auto Suspend
大剂量(输注)速度	Bolus Speed

6

探头(传感器)设置	Sensor Settings
探头(开/关)	Sensor
连接探头*	Sensor Connections*
警报静音*	Alert Silence*
高(血糖)设置*	High Settings*
低(血糖)设置*	Low Settings*
校准探头*	Calibrate Sensor*

7

事件标记(记事)	Event Markers
血糖	BG
注射	Injections
膳食(食物)	Food
运动	Exercise
其它	Other

8

提醒(闹钟)	Reminders
个人	Personal
大剂量血糖检查(餐后血糖检查)	Bolus BG Check
忘记膳食大剂量(忘记打大剂量)	Missed Meal Bolus
储药器液量低	Low Reservoir
更换管路	Set Change
校准*	Calibration*

9

实用工具	Utilities
飞行模式	Airplane Mode
显示选项	Display Options
时间/日期	Time/Date
遥控大剂量	Remote Bolus
阻止模式(童锁)	Block
自我测试	Self Test
碳水系数	Carb Unit
管理设置	Manage Settings
探头演示	Sensor Demo
设备选项(外设)	Device Options
语言	Language

注意!

\* 功能仅在探头(传感器)功能打开时可用。

\* Only available when Sensor feature is on.

~~PS: 探头未开启, 带星号的项目不显示~~

~~管理设置须同时按住⇨⇩不放进入~~

~~自动暂停是指一段时间不按任何按键即暂停~~

~~低血糖前暂停和低血糖暂停在低(血糖)设置里~~

~~约旦大兵排版翻译, 错了概不负责~~